

EMS 15 + RF

- 01 EMS, Electrical Muscle Stimulation
 - 02 15 TESLA
 - 04 4 Pads + Coussin pelvien
-





Medic M EMS 15 + RF

Le BodySculpt 15 Tesla est un équipement de stimulation musculaire électrique (EMS).

Cette combinaison unique permet de tonifier et de renforcer les muscles, tout en réduisant la graisse corporelle et en améliorant la texture de la peau.

Le système utilise des ondes électromagnétiques haute intensité pour stimuler les fibres musculaires profondes, créant ainsi une contraction musculaire intense. Cette contraction active le processus de lipolyse, qui décompose les cellules graisseuses pour être utilisées comme source d'énergie.

En résumé, le BodySculpt 15 est un équipement de pointe qui permet de tonifier les muscles, de réduire la graisse corporelle et d'améliorer la texture de la peau de manière efficace et rapide.

Les zones de traitement recommandées pour le BodySculpt :




Les abdominaux, les muscles obliques, les muscles du dos, des bras, des fesses, des cuisses, des mollets, mais également le plancher pelvien, pour renforcer et tonifier les muscles de cette zone et améliorer la continence urinaire.

Créer l'équilibre parfait entre l'offre et les besoins des clients.

LES FONCTIONS

Applications

- 3 actions simultanées, 5 pads en même temps, pour une réduction des amas graisseux jusqu'à -30%, et une augmentation de la masse musculaire jusqu'à 25%.

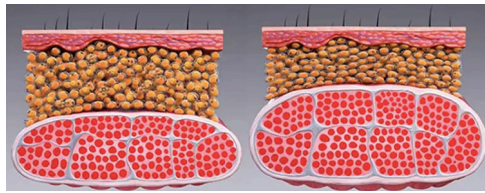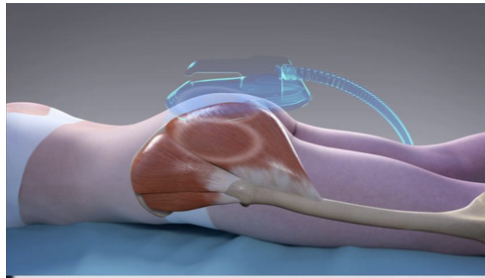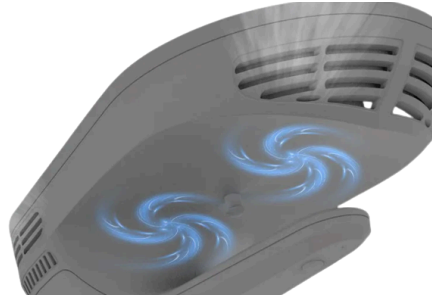

Avant

Après

Réduction des amas graisseux de -30% et + 25% de muscle

Le BodySculpt 15 est un équipement de pointe qui combine la stimulation musculaire électrique (EMS) pour tonifier les muscles, réduire la graisse corporelle et améliorer la texture de la peau. Cet équipement est conçu pour les professionnels de la beauté et de la santé qui cherchent à offrir à leurs clients des traitements efficaces pour sculpter leur corps.

Les avantages du TeslaSculpt 15 :

- Tonification musculaire : la combinaison de l'EMS permet de stimuler les fibres musculaires profondes, créant ainsi une contraction musculaire intense qui aide à renforcer et à tonifier les muscles.
- Réduction de graisse : le processus de lipolyse décompose les cellules graisseuses pour être utilisées comme source d'énergie, ce qui entraîne une réduction de la graisse corporelle.
- Absence de douleur ni de temps d'arrêt : contrairement à d'autres traitements de tonification musculaire et de réduction de graisse, le BodySculpt 15 est indolore et ne nécessite pas de temps d'arrêt, ce qui permet aux clients de reprendre leurs activités normales immédiatement après le traitement.

Données techniques :

- La bobine de stimulation à double couche permet des effets électromagnétiques plus intenses et en profondeur.
- Le système de refroidissement BodySculpt par air évite la surchauffe pour un traitement prolongé.
- Les quatre applicateurs de stimulation magnétique permettent de traiter simultanément ou individuellement toutes les zones ciblées.
- BodySculpt permet d'effectuer 40 000 abdominaux en 30 minutes pour renforcer les muscles tout en éliminant la graisse.



NORME 2017/745 UE
NORME 2014/35 UE

Créer l'équilibre parfait est la clé.

DONNÉES TECHNIQUES

protocole

Caractéristiques techniques :

- Zone ciblée : Corps, Jambes / Bras
- Objectifs : Perte de poids, Raffermissement de la peau, Réduction de la cellulite, Levée des fesses, Renforcement musculaire, Combustion des graisses
- Garantie : 3 ans
- Poignées : 4 poignées + Coussin pelvien
- Intensité énergétique : jusqu'à 15 Tesla
- Zone de traitement : Corps, Jambes, Bras
- Fréquence RF : 1-150 Hz
- Fonction : Levée des fesses, Renforcement musculaire, Combustion des graisses
- Technologie : Électromagnétique haute intensité focalisée
- Taille de l'applicateur : Grande zone de traitement de 170 mm
- Fonction 1 : Amincissement du corps, Réduction de la cellulite
- AC : 220V-240V
- 3000W (Nécessite un régulateur de tension électrique)

Durée du traitement :

15-30 minutes par séance.

2 à 3 fois par semaine sur une même zone.



Voici un protocole possible pour une séance de 15 à 30 minutes avec un EMS 15 Tesla :

- Préparation : Installer le patient confortablement sur la table de traitement, avec les électrodes d'EMS positionnées sur les muscles ciblés. Appliquer une fine couche de gel conducteur sur les électrodes pour optimiser la conductivité de l'appareil.
- Phase d'échauffement : Commencer par une phase d'échauffement avec une fréquence de 20 Hz pendant 3 minutes, à une intensité faible-moyenne. Cette étape permet de préparer les muscles à la stimulation électrique.
- Phase de travail : Augmenter progressivement l'intensité de l'EMS jusqu'à atteindre un niveau élevé et confortable pour le patient, en choisissant la fréquence appropriée selon les zones ciblées. Maintenir cette intensité pendant environ 10 à 20 minutes, en variant la fréquence et l'intensité pour stimuler les différents groupes musculaires.
- Phase de refroidissement : Après la phase de travail, réduire progressivement l'intensité de l'EMS pendant 2-3 minutes, pour permettre une récupération progressive des muscles.
- Fin de la séance : Terminer la séance en enlevant les électrodes et en nettoyant la peau avec une solution désinfectante.

(*Il est important de noter que ce protocole est uniquement indicatif et que les réglages précis de l'appareil doivent être adaptés aux besoins et aux caractéristiques de chaque patient. Il est également essentiel que les soins soient effectués par un professionnel formé et qualifié, respectant l'utilisation d'appareils sous la norme CE MÉDICAL.

Les bonnes pratiques, la découverte des contre indications, la mise en place de protocoles adaptés et l'utilisation de la machine dans les règles de l'art, sont uniquement de la responsabilité du praticien.

Nous déclinons ainsi toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou de non respect des protocoles applicables, et ne serions être tenu pour responsable des dommages ou préjudices qui pourraient en découler.

Une des machines les plus puissantes, financée en facturant en moyenne 10 séances par mois, sur une base de 100 euros TTC la séance.



NORME 2017/745 UE

NORME 2014/35 UE

MÉDIC M ESSENTIEL
Médecine esthétique



MÉDIC M ESSENTIEL

Contactez-nous



contact@medicmessentiel.com

06.46.41.12.74

contact@medimessentiel.com